

# T-Edge 10

Efficacité maximale.  
Coût minimal.



Performances de classe B


L'autoclave de stérilisation totalement automatique  
Conçu pour les cabinets dentaires et petits cabinets médicaux

  
**Tuttinauer**  
Innovation · Legacy · Partnership

# Heureux de vous rencontrer. Je suis le nouveau T-Edge 10 et je vais vous accompagner à chaque étape de la stérilisation.

La stérilisation en un clic

Sélectionnez simplement le programme souhaité et appuyez sur « Démarrer ».  
Je m'occupe de tout le reste. C'est ce que j'appelle le « Click and Go ».

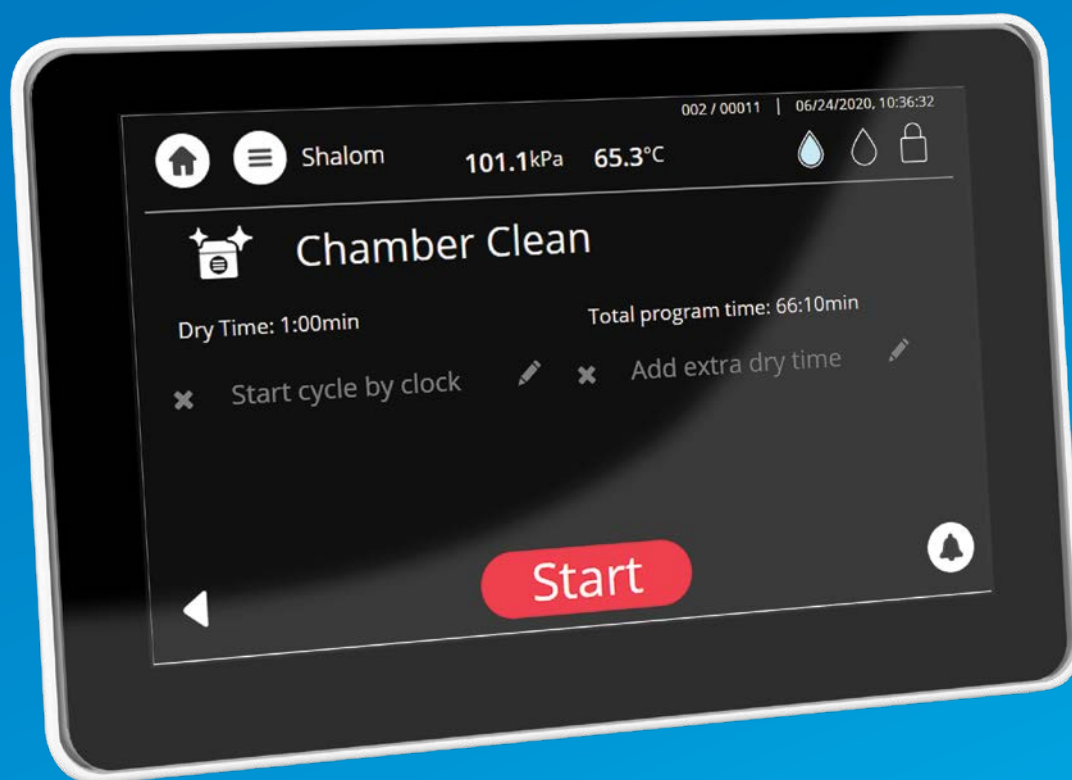

L'autoclave de stérilisation totalement  
automatique du début à la fin

# Tellement plus qu'un simple autoclave

Votre cabinet a besoin de vos compétences et votre temps est précieux. C'est pourquoi je vais vous aider à libérer du temps.

- ◆ Conformité aux normes internationales strictes
- ◆ Capacités de stérilisation vérifiées en milieu clinique
- ◆ Écran tactile haute résolution
- ◆ Technologie originale innovante
- ◆ Interface simple à utiliser
- ◆ Conception élégante
- ◆ Excellente expérience utilisateur



Laissez-moi m'occuper de la stérilisation pendant que vous vous occupez de vos patients !

# Effacité maximale. Coût minimal.



## Optimisez le temps que vous passez avec vos patients

- Click & go
- Cycles courts
- Capacités de surveillance à distance\*\*
- Processus de stérilisation fiables



## Renforcez la sécurité de vos patients

- Multiples options de traçabilité
- Cycles de test préprogrammés
- Protégez la réputation de votre clinique
- Conformité aux normes de sécurité strictes



## Limitez vos frais d'exploitation

- Autoclave économique innovant
- Cycle de vie étendu
- Frais de maintenance réduits
- Frais d'exploitation quotidiens et hebdomadaires réduits

Améliorez la satisfaction et la fidélité de vos patients en réduisant le temps et les efforts que vous devez consacrer à la stérilisation

# Je suis si compact et élégant que je trouve ma place n'importe où.



- Capacité de chambre optimale (plus de 75 %), avec 5 plateaux extra-longs\*
- Pratique et facile à charger grâce à une ouverture de porte à 110°
- Plusieurs méthodes de remplissage et d'évacuation d'eau, même si l'autoclave est positionné dans une armoire (par le dessus, par l'avant, automatique)
- Cycle rapide comprenant stérilisation et séchage complet
- Plusieurs programmes automatiques accessibles via un bouton, y compris des programmes de test
- Écran tactile facile à utiliser pour afficher les programmes, durées de cycle, niveaux d'eau, etc.
- Options avancées de documentation et de traçabilité et codes-barres
- Surveillance à distance par Wi-Fi via smartphone ou tablette\*\*



## T-Edge 10

Utilisation simple depuis votre smartphone

\* Les modèles de plateau exacts seront indiqués dès que possible

\*\*Capacités de surveillance à distance disponibles très bientôt. Une mise à niveau gratuite sera proposée dans les conditions indiquées par l'entreprise.

# La grande capacité de ma chambre et mes cycles plus courts sont synonymes de **coûts réduits pour votre cabinet**


## Capacité de chambre optimale

- 5 plateaux extra-longs pour charges emballées / non emballées\*
- 3 cassettes dentaires format complet + 3 cassettes dentaires quart de format
- Capacité disponible égale à plus de 75 % de la chambre



## Fonctionnement durable

- Entretien simplifié
- Maintenance facilitée
- Durée de vie étendue

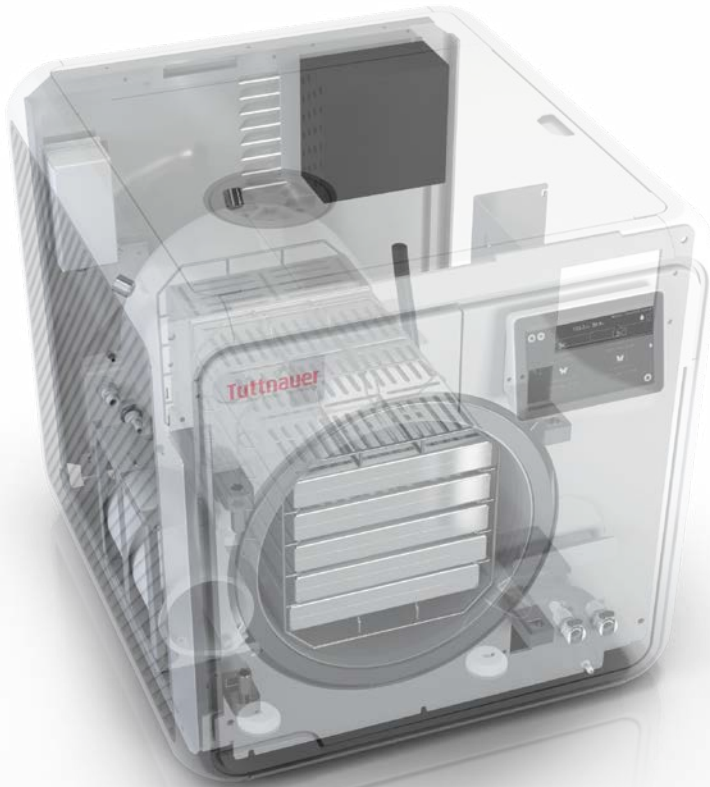

## Respectueux de l'environnement

- Consommation d'eau réduite d'environ 40 %
- Consommation d'énergie réduite grâce à des cycles plus courts
- Consommation électrique réduite grâce à la programmation en heures creuses



## Surveillance en temps réel Stérilisation T-Edge 10 via smartphone



**Stérilisation maximale.  
Coût minimal.**



1. Placez la poche dans la chambre.



2. Procédez à la stérilisation.



3. Recevez les codes-barres avec les données de stérilisation (y compris la date d'expiration).



4. Appliquez l'étiquette de code-barre sur chaque poche.







\* Scannez les données de codes barres pour le dossier du patient pendant le traitement, à des fins de sécurité et de respect des réglementations.



**Stérilisation terminée**



# Caractéristiques techniques

Icône	Programme	Type de charge	Durée du cycle (min)*	Durée du séchage (min)
	Non emballés 134	Instruments non emballés	21	1
	Emballés 134	Instruments emballés	25	15
	Non emballés 121	Instruments fragiles non emballés	32	1
	Emballés 121	Instruments fragiles emballés	45	15

\* Durées de cycle basées sur :  
Charges standard d'1 kg (hors séchage)  
Chambre chaude

	T-Edge 10
Taille de la chambre	46 cm de profondeur x 25 de diamètre
Volume de la chambre	23 litres
Dimensions (l x h x p)	48 cm x 50 cm x 58 cm
Poids	50 kg
Alimentation	50/60 Hz
Consommation électrique	2000 W
Connexions	1 port Ethernet, 4 ports USB, WI-FI, raccordement intégré pour le remplissage et l'évacuation automatiques de l'eau
Nombre de plateaux	5
Articles fournis	Tuyau d'évacuation

# Sécurité

## est mon deuxième prénom

**Les réglementations de sécurité exigent que tous les processus de stérilisation soient documentés, archivés et enregistrés. T-Edge 10 propose différentes méthodes de documentation et d'enregistrement des cycles de stérilisation :**

- Mémoire interne permettant de stocker jusqu'à 1000 cycles de stérilisation
- Impressions favorisant les économies de papier
- Connexion Ethernet pour le transfert des données vers votre ordinateur ou votre réseau
- Sortie USB permettant le transfert de données vers votre ordinateur ou réseau
- Capacités sophistiquées d'analyse des données avec le logiciel Tuttnauer RPCR

Vous pouvez aussi définir un nom d'utilisateur et un mot de passe personnalisés pour chaque employé afin de renforcer la sécurité, la protection et la traçabilité.

## La sécurité est le principal enjeu

**T-Edge 10 est conforme aux normes internationales suivantes :**

### **Système de gestion de la qualité :**

- ISO 13485
- Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

### **Voie de certification de la chambre pressurisée :**

- ASME Code section I et section VIII. Div.I, PED 2014/68/UE

### **Sécurité électrique :**

- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

### **Compatibilité électromagnétique :**

- EN 61326-1

### **Tests fonctionnels de vérification et de certification :**


- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

### **Validation du logiciel :**

- EN 62304, directives de la FDA

### **Tests d'ergonomie (aptitude à l'utilisation, ingénierie des facteurs humains) :**

- IEC 62366-1

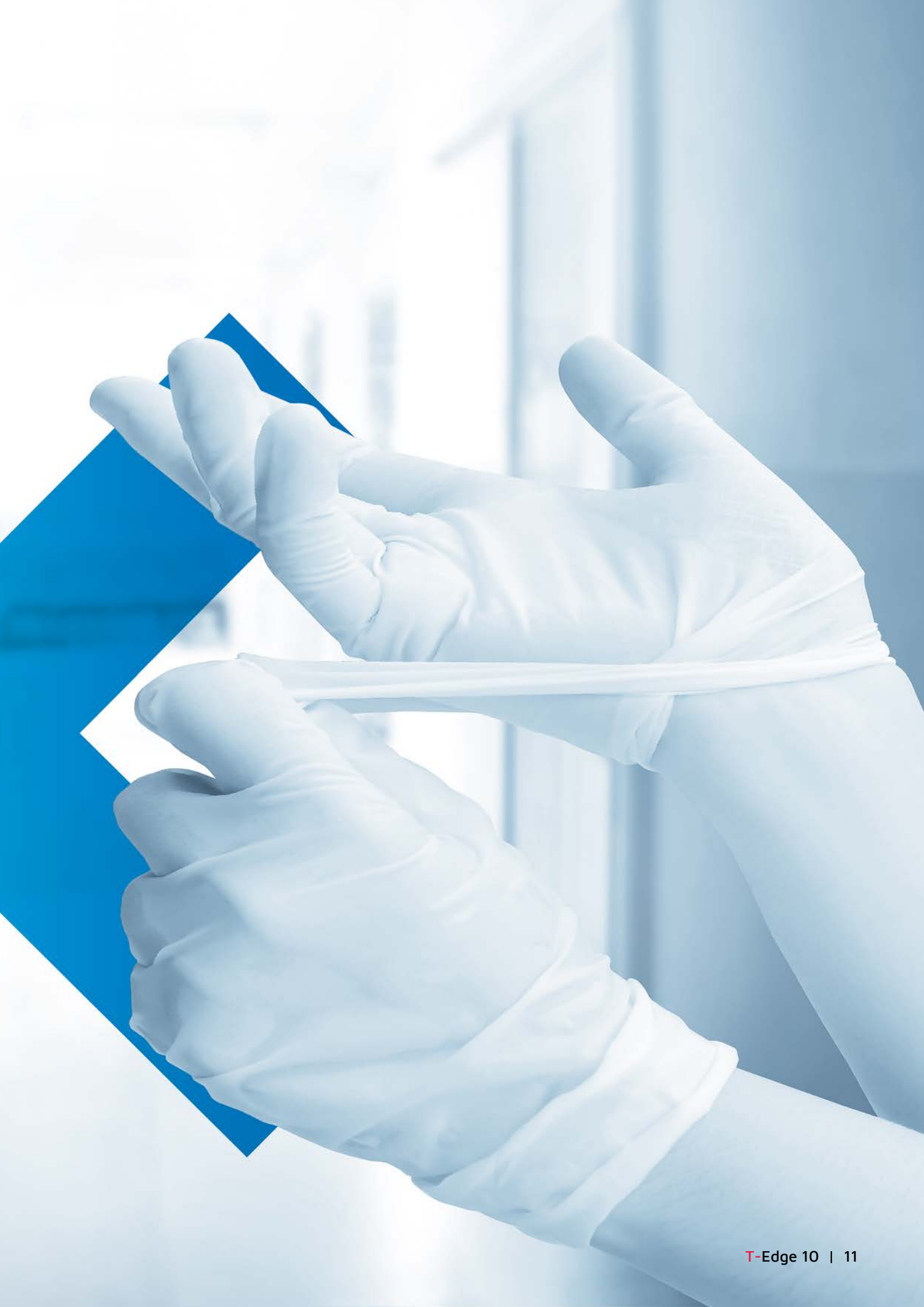

# Tuttnauer



Des leaders mondiaux renommés dans les solutions de contrôle de l'infection, possédant plus de

**90** ans  
d'expérience

Des produits distribués dans les cabinets médicaux, hôpitaux et instituts de recherche de plus de

**140**  
pays

## TUTTNAUER, VOTRE FOURNISSEUR UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS DE CONTRÔLE DES INFECTIONS.

Laissez-moi vous présenter notre gamme complémentaire de produits pour un processus de stérilisation complet.



Soudeuse



Laveur TIVA2



Distillateur



Bac à ultrasons



Nettoyage de la chambre

### Ventes et marketing international

E-mail : [info@tuttnauer.com](mailto:info@tuttnauer.com)

[www.tuttnauer.com](http://www.tuttnauer.com)

### Tuttnauer Europe b.v.

Hoeksteen 11, 4815 PR  
PO Box 7191, 4800 GD Breda  
Pays-Bas  
Tél : +31 765 423 510  
Fax : +31 765 423 540  
E-mail : [info@tuttnauer.nl](mailto:info@tuttnauer.nl)

### Tuttnauer USA Co.

25 Power Drive,  
Hauppauge, NY 11788  
Tél : +800 624 5836, +631 737  
4850  
Fax : +631 737 0720  
E-mail : [info@tuttnauerUSA.com](mailto:info@tuttnauerUSA.com)

Distribué par :



Apprenez de nos experts

Consultez notre blog [tuttnauer.com/blog](http://tuttnauer.com/blog)

