

Art. N°	Description	Conditionnement	
		intérieur	extérieur
VACUETTE® Corps de pompe de sécurisé QUICKSHIELD			
450230	VACUETTE® Corps de pompe de sécurisé QUICKSHIELD	50 pcs.	1000 pcs.
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1", stérile, à usage unique Corps de pompe de sécurisé & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1 1/2", stérile, à usage unique Corps de pompe de sécurisé & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1", stérile, à usage unique Corps de pompe de sécurisé & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1 1/2", stérile, à usage unique Corps de pompe de sécurisé & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons (stérile)			
450071	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, noir 0.7 x 25mm 22G x 1"	100 pcs.	2000 pcs.
450072	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, vert 0.8 x 25mm 21G x 1"	100 pcs.	2000 pcs.
450073	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, jaune 0.9 x 25mm 20G x 1"	100 pcs.	2000 pcs.
450075	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, noir 0.7 x 38mm 22G x 1 1/2"	100 pcs.	2000 pcs.
450076	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, vert 0.8 x 38mm 21G x 1 1/2"	100 pcs.	2000 pcs.
450077	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, jaune 0.9 x 38mm 20G x 1 1/2"	100 pcs.	2000 pcs.
Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS (stérile)			
450040	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, vert 0.8 x 38mm 21G x 1 1/2"	100 pcs.	2000 pcs.
450041	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, noir 0.7 x 38mm 22G x 1 1/2"	100 pcs.	2000 pcs.
450042	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, vert 0.8 x 25mm 21G x 1"	100 pcs.	2000 pcs.
450043	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, noir 0.7 x 25mm 22G x 1"	100 pcs.	2000 pcs.

Ces produits ne contiennent aucun composant en latex naturel.



Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site www.gbo.com/preanalytics ou nous contacter :

Autriche (siège)

Greiner Bio-One GmbH
Tél. +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Espagne

VACUETTE Espana S.A.
Tél. +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

Inde

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tél. +91 120 456 8787
Fax +91 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Suisse

Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH
Tél. +41 71 228 55 22
Fax +41 71 228 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Allemagne

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tel +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Etats-Unis

Greiner Bio-One North America Inc.
Tél. +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com

Pays-Bas

Greiner Bio-One B.V.
Tél. +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Thaïlande

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tél. +66 38 46 56 33
Fax +66 38 46 56 36
E-Mail office@th.gbo.com

Brésil

Greiner Bio-One Brasil
Tél. +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail office@br.gbo.com

France

Greiner Bio-One SAS
Tél. +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail office@fr.gbo.com

Royaume-Uni

Greiner Bio-One Ltd.
Tél. +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Chine

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tél. +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

Hongrie

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tél. +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com



VACUETTE®
QUICKSHIELD Corps
de pompe sécurité

Nos innovations
pour votre sécurisé




980054 rev.04, 12.2012, f

VACUETTE® QUICKSHIELD Corps de pompe sécurisé

Pour les prélèvements sanguins de routine

Le corps de pompe sécurisé **VACUETTE® QUICKSHIELD** est particulièrement adapté aux prélèvements sanguins de routine. La technique de prélèvement reste identique et la protection de l'aiguille s'active soit d'une main à l'aide d'une surface solide, soit avec le pouce. Ce produit garantit au préleveur un maniement extrêmement simple et une protection fiable contre les Accidents d'Exposition au Sang (AES).

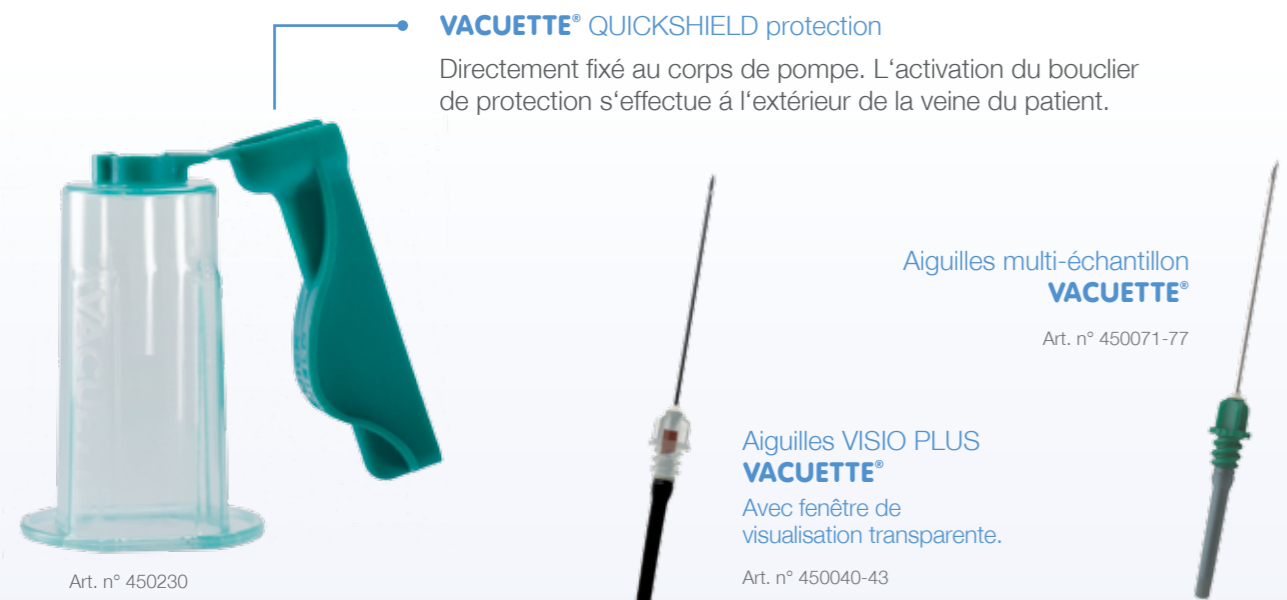

VACUETTE® QUICKSHIELD
Corps de pompe de sécurisé
Son design ergonomique assure une meilleure prise en main.

Avec une forme étudiée pour une ponction indolore. Grâce à la compatibilité parfaite des aiguilles avec le corps de pompe, le biseau se trouve toujours dans la bonne position pour un prélèvement facilité.

Le corps de pompe sécurisé VACUETTE® QUICKSHIELD offre les avantages suivants :

- Activation de la sécurité à l'aide d'une surface d'appui fixe.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à l'activation d'une seule main.
- Le point d'orientation du biseau sur l'aiguille permet à l'utilisateur de positionner le corps de pompe de façon optimale pour la ponction veineuse.
- Pour une utilisation exclusive avec les aiguilles multi-échantillons **VACUETTE®** ou avec les aiguilles VISIO PLUS **VACUETTE®**.
- Aucune modification de la technique de prélèvement.
- Produit sécurisé car la main du préleveur reste toujours loin de l'aiguille souillée.
- La fixation du bouclier permet une position stable lors de la ponction.
- Un „clic“ sonore prévient de la mise en sécurité définitive de l'aiguille.



la solution tout en un: VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Également disponible en tant que produit complet avec une aiguille **VACUETTE® VISIO PLUS** préassemblée, faisant du corps de pompe sécurisé **VACUETTE® QUICKSHIELD** le produit idéal pour un prélèvement sanguin sûr. L'aiguille **VACUETTE® VISIO PLUS** avec contrôle visuel du retour veineux facilite grandement le prélèvement sanguin par le préleveur. Grâce à la fenêtre transparente à l'embase de l'aiguille, le flux sanguin est visible immédiatement après une ponction veineuse réussie.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS (corps de pompe sécurisé + aiguilles VISIO PLUS VACUETTE®)

- Aiguille pré-montée avec corps de pompe dans un sachet unitaire stérile.
- Fenêtre transparente pour un contrôle du retour sanguin veineux.
- Pas besoin de visser l'aiguille.
- Solution pratique complète pour gagner du temps.
- Manipulation optimisée.



Le corps de pompe sécurisé est particulièrement adapté aux prélèvements sanguins de routine et réduit les risques d'AES.



Notice d'utilisation *



1 Visser l'aiguille **



2 Retirer le capuchon



3 Effectuer la ponction veineuse



4 Insérer et maintenir le tube



5 Retirer et homogénéiser le tube



6 Activer le mécanisme de sécurité (à l'aide d'une surface solide ou du pouce)



7 Effectuer la mise en sécurité jusqu'au « clic » sonore



8 Eliminer l'ensemble dans un collecteur adapté

* Vous trouverez l'intégralité de la procédure de prélèvement sanguin dans le mode d'emploi.

** Étape inutile avec QUICKSHIELD Complete PLUS.