

Art. n°	Vol. nom.	Couleur bouchon	Description	Conditionnement	
				intérieur	extérieur
<b>Système de prélèvement sanguin capillaire (tubes)</b>					
450412	---	blanche	Z Sans additif	100 pcs.	1000 pcs.
450447	0.5ml	bleu clair	9NC Coagulation 3,2% (Convient uniquement pour le sang veineux)	100 pcs.	1000 pcs.
450413	1ml	bleu clair	9NC Coagulation 3,2% (Convient uniquement pour le sang veineux)	100 pcs.	1000 pcs.
450409	1ml	bleu clair	9NC Coagulation 3,8%	100 pcs.	1000 pcs.
450471	0.5ml	rouge	Z Sérum	100 pcs.	1000 pcs.
450470	1ml	rouge	Z Sérum	100 pcs.	1000 pcs.
450473	0.5ml	or	Z Sérum + Gel	100 pcs.	1000 pcs.
450472	0.8ml	or	Z Sérum + Gel	100 pcs.	1000 pcs.
450478	0.5ml	vert	LH Héparine de lithium	100 pcs.	1000 pcs.
450477	1ml	vert	LH Héparine de lithium	100 pcs.	1000 pcs.
450479	0.8ml	vert clair	LH Héparine de lithium + Gel	100 pcs.	1000 pcs.
450476	0.25ml	lavande	K3E EDTA K3	100 pcs.	1000 pcs.
450475	0.5ml	lavande	K3E EDTA K3	100 pcs.	1000 pcs.
450474	1ml	lavande	K3E EDTA K3	100 pcs.	1000 pcs.
450484	0,25 ml	lavande	K2E EDTA K2, étiquette transparente	100 pcs.	1000 pcs.
450480	0.5ml	lavande	K2E EDTA K2	100 pcs.	1000 pcs.
450481	0.25ml	gris	FX Fluorure de sodium / oxalate de potassium	100 pcs.	1000 pcs.
450482	0.5ml	gris	FX Fluorure de sodium / oxalate de potassium	100 pcs.	1000 pcs.
<b>Système de prélèvement sanguin capillaire (accessoires)</b>					
450419	Portes tubes, couleur d'ambre, 13x75 mm			100 pcs.	1000 pcs.
450420	Portes tubes, 13x75 mm			100 pcs.	1000 pcs.
450421	Entonnoir			100 pcs.	1000 pcs.
450430	Capillaire pour Sérum, 250µl			100 pcs.	1000 pcs.
450431	Capillaire pour Sérum, 80µl			100 pcs.	1000 pcs.
450437	Capillaire pour NaF, 250µl			100 pcs.	1000 pcs.
450432	Capillaire pour NaF, 80µl			100 pcs.	1000 pcs.
450433	Capillaire pour EDTA, 250µl			100 pcs.	1000 pcs.
450434	Capillary for EDTA, 80µl			100 pcs.	1000 pcs.
450435	Capillaire pour Héparine, 250µl			100 pcs.	1000 pcs.
450436	Capillaire pour Héparine, 80µl			100 pcs.	1000 pcs.
450427	Lancette de sécurité à lames, rose, profondeur de ponction 1 mm			200 pcs.	2000 pcs.
450428	Lancette de sécurité à lames, vert, profondeur de ponction 1,5 mm			200 pcs.	2000 pcs.
450429	Lancette de sécurité à lames, bleu, profondeur de ponction 2 mm			200 pcs.	2000 pcs.
450438	Lancette de sécurité à aiguilles, lavande, 28G, profondeur de ponction 1,25 mm			200 pcs.	2000 pcs.
450439	Lancette de sécurité à aiguilles, orange, 23G, profondeur de ponction 2,25 mm			200 pcs.	2000 pcs.



Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site [www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics) ou nous contacter :

**Autriche (siège)**  
Greiner Bio-One GmbH  
Tél. (+43) 75 83 67 91-0  
Fax (+43) 75 83 63 18  
E-Mail [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)

**France**  
Greiner Bio-One SAS  
Tél. (+33) 1 69 86 25 25  
Fax (+33) 1 69 86 25 92  
E-Mail [office@fr.gbo.com](mailto:office@fr.gbo.com)

**Pays-Bas**  
Greiner Bio-One B.V.  
Tél. (+31) 1 72 42 09 00  
Fax (+31) 1 72 44 38 01  
E-Mail [info@nl.gbo.com](mailto:info@nl.gbo.com)

**Thaïlande**  
Greiner Bio-One Thailand Ltd  
Tél. (+66) 3 84 65 63-30  
Fax (+66) 3 84 65 63-6  
E-Mail [office@th.gbo.com](mailto:office@th.gbo.com)

**Brésil**  
Greiner Bio-One Brasil  
Tél. (+55) 19 34 68 96 00  
Fax (+55) 19 34 68 96 21  
E-Mail [office@br.gbo.com](mailto:office@br.gbo.com)

**Allemagne**  
Greiner Bio-One GmbH  
Tél. (+49) 2 01 861 86-0  
Fax (+49) 2 01 861 86-12  
E-Mail [office@de.gbo.com](mailto:office@de.gbo.com)

**Espagne**  
VACUETTE Espana S.A.  
Tél. (+34) 91 652 77 07  
Fax (+34) 91 652 33 35  
E-Mail [info@vacuette.es](mailto:info@vacuette.es)

**Royaume-Uni**  
Greiner Bio-One Ltd.  
Tél. (+44) 14 53 82 52 55  
Fax (+44) 14 53 82 62 66  
E-Mail [info@uk.gbo.com](mailto:info@uk.gbo.com)

**Egypte**  
Greiner Bio-One Middle East  
Tél. (+20) 26 21 87 06  
Fax (+20) 26 21 87 08  
E-Mail [hisham.ouda@gbo.com](mailto:hisham.ouda@gbo.com)

**Hongrie**  
Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Tél. (+36) 96 21 30 88  
Fax (+36) 96 21 31 98  
E-Mail [office@hu.gbo.com](mailto:office@hu.gbo.com)

**Suisse**  
Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH  
Tél. (+41) 7 12 28 55 22  
Fax (+41) 7 12 28 55 21  
E-Mail [office@ch.gbo.com](mailto:office@ch.gbo.com)

**Etats-Unis**  
Greiner Bio-One North America Inc.  
Tél. (+1) 70 42 61 78 00  
Fax (+1) 70 42 61 78 99  
E-Mail [office@us.gbo.com](mailto:office@us.gbo.com)



## MiniCollect® Système de prélèvement sanguin capillaire

Hygiénique et bien toléré,  
conçu pour les nouveaux-nés

## MiniCollect® Système de prélèvement sanguin capillaire



### Lancettes de sécurité

- 5 profondeurs de ponction différentes pour plusieurs utilisations :  
Lames: rose 1 mm, vert 1,5 mm, bleu 2,0 mm  
Aiguilles: lavande 1,25 mm, orange 2,25 mm
- Profondeur constante de ponction pour un prélèvement pratique
- Protégées par un fourreau en plastique en toute sécurité après usage
- Direction de ponction constante grâce à la lame aiguisée de manière homogène



### Flexibilité grâce au prélèvement par entonnoir ou capillaire plastique

- Prélèvement à l'aide d'un entonnoir spécialement adapté
- Prélèvement à l'aide d'un capillaire en plastique « coaté »



### Bouchon unique « cross cuts »

- Assure le remplissage et le prélèvement facile et hygiénique d'échantillons sanguins
- Le bouchon se referme automatiquement




### Porte-tube pour la centrifugation

- Porte-tube transparent pour la centrifugation
- Porte-tube ambré pour les paramètres photo-sensibles
- Approprié en particulier pour le positionnement du code à barre

### Tubes MiniCollect®

- La paroi interne du tube en polymère est recouverte de l'additif tout le long de la paroi (à l'exception du citrate de sodium, qui est à dosage liquide)
- Étiquette avec champ d'inscription

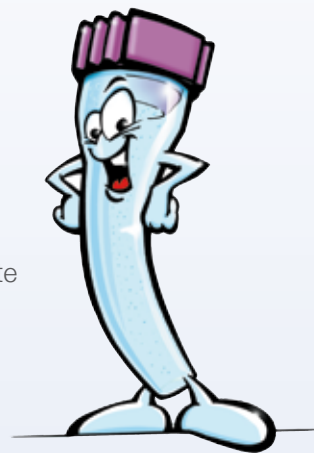

Fluorure de sodium /  
Oxalate de potassium

Sérum

Sérum +  
Gel

Héparine de  
lithium

Héparine de  
lithium + Gel

Sans  
additif

K3EDTA  
K2EDTA

Citrate de  
sodium\*

\* uniquement approprié pour le sang veineux, sans dosage à pulvérisation




MiniCollect® Système de prélèvement sanguin capillaire

## Les avantages d'un coup d'œil :

- Le bouchon flexible en caoutchouc « cross cuts » évite l'ouverture du tube
- Un maximum de sécurité grâce à un système fermé
- Étiquette pour l'identification des tubes
- Détermination précise du volume de remplissage à l'aide de la marque de graduation sur le tube (1 ml) ou sur l'étiquette (< 1 ml)
- Entonnoir ou capillaire utilisables selon les besoins
- Conception du tube à fond plat pour un positionnement vertical assuré

## Mode d'emploi

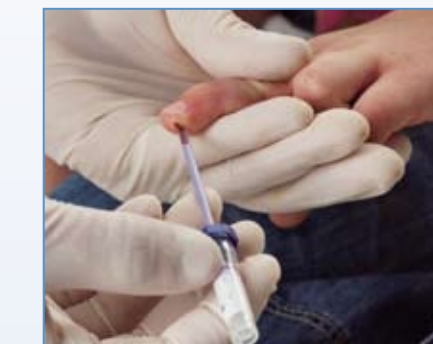

- Nettoyer le site de ponction
- Tirer pour enlever la protection de la lame
- Nettoyer le site de ponction
- Tourner et tirer pour enlever la protection de l'aiguille
- Pour prélever au bout du doigt, le maintenir entre le pouce, l'index et le majeur
- Positionner la lancette et pousser le bouton de déclenchement vers le bas
- Éliminer la première gouttelette de sang
- Presser le doigt afin de faire apparaître des gouttelettes de sang

### Prélèvement à l'aide de l'entonnoir

- Les gouttelettes de sang sont recueillies par l'entonnoir placé dans le tube

### Prélèvement à l'aide du capillaire

- Tenir le capillaire avec le tube à la verticale
- Par capillarité, le sang s'écoule dans le tube
- Ordre du prélèvement :  
1) Tubes EDTA  
2) Tubes avec d'autres additifs  
3) Tubes sans additifs
- A la fin du prélèvement, retirer l'entonnoir ou le capillaire du tube. Le bouchon se referme ainsi automatiquement.
- Agiter doucement le tube plusieurs fois après le prélèvement.