

# Delta-Dry®

Protections sous plâtre hydrofuges



La solution  
adaptée à votre  
style de vie

**BSN** medical



# La nouvelle norme

Quel patient n'aimerait pas mieux porter un plâtre résistant à l'eau? Un plâtre qui permettrait de se **doucher, de prendre un bain ou de nager!** La nouvelle gamme de produits Delta-Dry® offre des protections sous plâtre aux qualités hydrofuges exceptionnelles qui permettent aux patients de maintenir leurs **habitudes d'hygiène** sans aucune restriction. Il en résulte une meilleure hygiène et un confort accru pour les patients, ainsi que moins de changements non prévus de plâtres. Il est temps d'adopter la nouvelle norme en matière de traitement des fractures!



# pour le traitement des fractures

## Résistance à l'eau grâce au système Quick-Dry

La technologie brevetée de fibres à tissage ouvert offre une excellente résistance à l'eau. La structure à tissage accélère l'évacuation de l'eau après immersion. La chaleur corporelle permet ensuite au liquide résiduel de s'évaporer rapidement à travers les mailles ouvertes (coefficient élevé de transmission de vapeur d'eau \*). Ainsi, le plâtre et la peau sèchent rapidement; la peau est sèche une heure et demie après l'hygiène quotidienne.

## Traitement économique

Les produits de la gamme Delta-Dry® contribuent à la rentabilité de la thérapie. Ils réduisent les risques de changements non prévus de plâtres. Ils permettent aux patients de maintenir leurs habitudes d'hygiène et leurs activités quotidiennes à un coût abordable, à la double satisfaction des patients et des cliniciens.

## Technique de pose habituelle


Les produits de la gamme Delta-Dry® s'appliquent exactement comme les produits conventionnels pour la pose de plâtres : nul besoin d'acquies de nouvelles techniques ou de suivre une formation spéciale. Ces matériaux hautement conformables et extensibles permettent une application facile, rapide et sans faux plis. De plus, les produits Delta-Dry® résistent aux vibrations d'une scie à plâtre; celui-ci peut être retiré facilement, avec les outils habituels. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site internet [www.bsnmedical.com/delta-dry](http://www.bsnmedical.com/delta-dry).

## Normes des soins aux patients

La fibre maillée en polypropylène-nylon-polyester des produits Delta-Dry® procure à la peau un rembourrage doux et confortable. Sa perméabilité élevée garde la peau au sec et bien aérée, réduisant du même coup les problèmes de macération, de démangeaison et d'odeurs. En conséquence, le patient est plus satisfait, l'adhérence au traitement est améliorée.

### \* Coefficient de transmission de la vapeur d'eau (MVTR)

Quantité d'eau pouvant traverser 1, 2 ou 3 couches de ouate

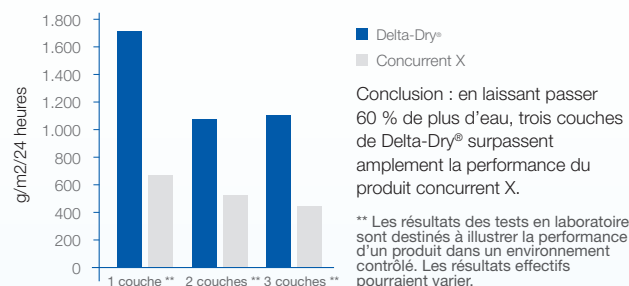

### Delta-Dry®

Application sans faux plis

### Competitor X

Adaptabilité réduite

# Delta-Dry®

Protections sous plâtre hydrofuges



Nouveau!

**Delta-Dry®** est maintenant disponible en jersey orthopédique pour une pose rapide et facile!

**Delta-Dry® Stockinette** – jersey orthopédique hydrofuge à utiliser en combinaison avec la ouate orthopédique Delta-Dry®. Une solution standard.

Nouveau!



Code	Dimensions	Qté/Boîte
7456400	2.5 cm x 10 m	1 rouleau
7456401	5 cm x 10 m	1 rouleau
7456402	7.5 cm x 10 m	1 rouleau
7456403	10 cm x 10 m	1 rouleau
7456404	12.5 cm x 10 m	1 rouleau

**Delta-Dry® Softliner** – jersey orthopédique hydrofuge coussiné, pouvant être utilisé seul, sans ouate supplémentaire. Une solution rapide, en une seule étape.

Nouveau!



Code	Dimensions	Qté/Boîte
7277901	2.5 cm x 10 m	1 rouleau
7277902	5 cm x 10 m	1 rouleau
7277903	7.5 cm x 10 m	1 rouleau
7277904	10 cm x 10 m	1 rouleau
7277905	12.5 cm x 10 m	1 rouleau

**Delta-Dry®** – ouate orthopédique hydrofuge. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec le jersey orthopédique Delta-Dry® ou comme protection autour des saillies osseuses. Une solution standard.



Code	Dimensions	Qté/Boîte
7344300	5 cm x 2.4 m	12 rouleaux
7344301	7.5 cm x 2.4 m	12 rouleaux
7344302	10 cm x 2.4 m	12 rouleaux

Veuillez consulter l'étiquette du produit ou les informations insérées dans l'emballage pour des renseignements complets sur l'utilisation sécuritaire de ces produits. [www.bsnmedical.com/delta-dry](http://www.bsnmedical.com/delta-dry)